



Lyhyt käyttöohje

- ① **Kierroslukupainike:** Käynnistä moottori / nosta kierroslukua.
- ② **Jäähdytysainepainike:** Jäähdytysainepainiketta varten voidaan asettaa 2 eri käyttötapaa. Asetetusta käytöstavasta riippuen jäähdytysainepainikkeella on seuraavat toiminnot:
 Paina painiketta lyhyesti - jäähdytysaineen syöttömäärän kytkeminen päälle/pois päältä *tai*
 paina painiketta lyhyesti - jäähdytysaineen syöttömäärän säätö välille 0 ... 110 ml/s (4 vaihetta).
 Paina painiketta kauan - manuaalisen huuhtelutoiminnon aktivointi.
- ③ **Ohjelmointipainike:** Paina painiketta lyhyesti - ohjelmavaihe siirtyy eteenpäin. Paina painiketta kauan - ohjelmavaihe siirtyy taaksepäin.
- ④ **Moottorin pyörimissuunnan painike:** Valitsee moottorin pyörimissuunnan.

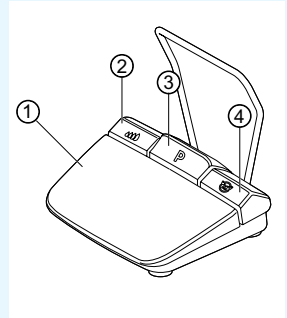

Letkusetin liitäntä

1. Sulje ⑦ letkunkiristin.
2. Kiinnitä jäähdytysaineletku
① käsi- tai kulmakappaleeseen.
3. Kiinnitä kiinnittimet ② tiukasti moottorin johtoon.
4. Napsauta letkun adapteri ③ kiinni.
5. Aseta letku pumppuun (n. 1 cm väli liittimen ja pumpun sisääntulon välillä).
6. Pistä pistoneulalla ⑥.
7. Avaa letkunkiristin ⑦.

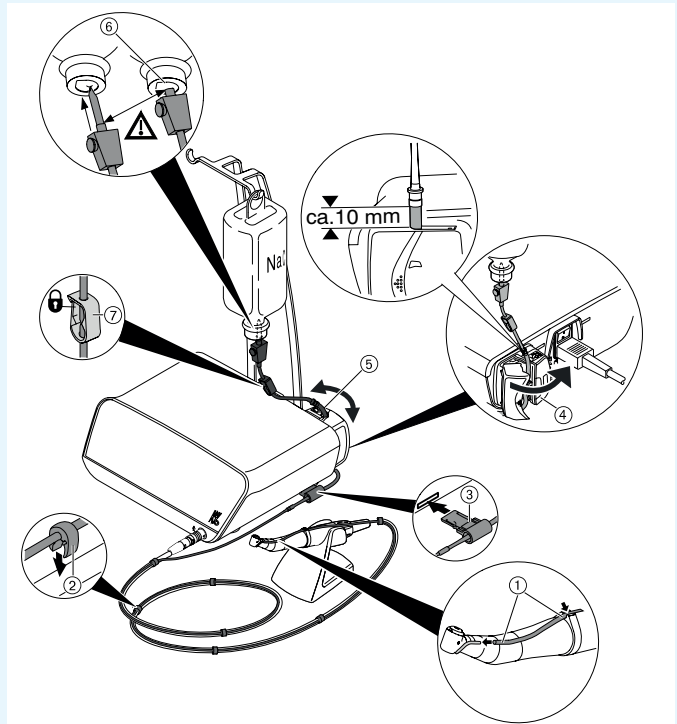

Huomautus


Avaa pistoneulan ⑥ tuuletusventtiili vain lasipullojen kanssa.



VARO

Näissä käyttöohjeissa on esitetty vain oleellimmat käyttötoiminnot. Ennen ensimmäistä käyttöönottoa sekä jos laitetta käyttävät henkilöt, jotka eivät ole tottuneet tämän lääkinällisen laitteen käyttöön, noudata ehdottomasti toimitukseen kuuluvan käyttöohjeen ohjeita.



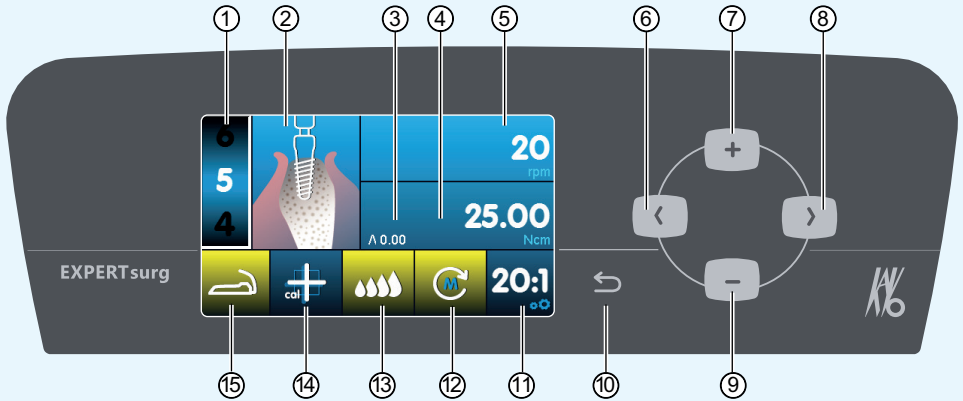

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ① Ohjelmavaihe (1 – 10) ② Toiminnon kuvaus (erillisesti valittavissa jokaisessa yksittäisessä ohjelmavaiheessa) ③ Ilmennyt maksimivääntömomenti ④ Vääntömomenttirajoitus ⑤ Kierrosluku ⑥ Nuolipainike vasemmalle ⑦ Plus-painike, arvon korotus ⑧ Nuolipainike oikealle | <ul style="list-style-type: none"> ⑨ Miinus-painike, arvon pienennys ⑩ Takaisin-painike (paina lyhyesti: takaisin) (paina pitkään: laiteasetukset) ⑪ Välitys ⑫ Moottorin pyörimissuunta ⑬ Jäähdytysainepumpun asetus ⑭ One-Touch-kalibroinnin aktivointi (tarkkaan vääntömomentin määritykseen) ⑮ Jalkakäynnistimen tilanäyttö |
|---|---|

Parametrin ja toiminnon muuttaminen

Laiteasetuksen valinta

Paina takaisin-painiketta ⑩ lyhyesti, jotta pääset ohjelmavaihevalikkoon. Paina pitkään päästäksesi laiteasetuksiin.

Parametrin tai toiminnon valinta

(Nuolipainike vasemmalle ⑥ tai nuolipainike oikealle ⑧)

Parametrin tai toiminnon muuttaminen

(Plus-painike ⑦, miinus-painike ⑨ tai jalkakäynnistin)

Tallennus tapahtuu automaattisesti parametrasta tai toiminnosta poistuessasi.

Ohjelmavaiheiden määrän rajoittaminen

Valitse ohjelmavaihe viimeisen halutun ohjelmavaiheen jälkeen ja valitse toiminto "lippu".

Ohjelmavaiheiden rajoituksen poisto

Valitse ohjelmavaihe toiminnolla "lippu" ja valitse uusi toiminto.

